




Metal Primer Z de GC

Votre meilleur allié,
la solution pour toutes
les restaurations
à base de métal.
Adhésif en 1 étape pour
le collage de résine sur métal.

GC

Vous recherchez un agent de collage pour créer une adhésion puissante entre les armatures métalliques et tous types de matériau à base de résine ?

Avec Metal Primer Z, GC vous présente le successeur de l'éprouvé Metal Primer II, le choix de nombreux professionnels dentaires depuis de nombreuses années. Avec ses deux monomères fonctionnels, Metal Primer Z crée des liens encore plus forts. L'adhésion aux métaux précieux est améliorée par le monomère **MDTP**. Le second monomère, **MDP**, favorise une adhésion puissante sur les alliages non précieux et même sur la Zircone pour certaines indications.

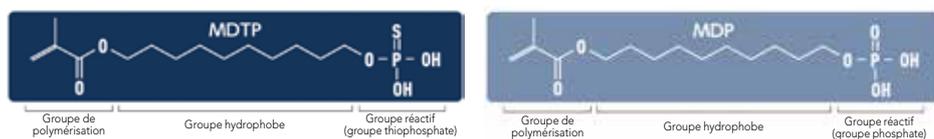

Metal Primer Z se démarque par ses caractéristiques :

- Une procédure facile et rapide
 - Aucun équipement supplémentaire
- Aucun traitement par la chaleur
 - Evite les variations inutiles de CET
- Crée une liaison permanente, même en milieu humide
 - Peut s'appliquer directement en bouche
- Utilisation universelle
 - Avec tous les alliages dentaires et acryliques



A chaque fois que vous avez à travailler avec des armatures métalliques et des matériaux à base de résine, choisissez un allié à la hauteur.

- Application du matériau à base de résine (opaque) au métal & zircone pour couronnes et bridges
- Collage ou réparation de prothèses avec base métallique, crochet ou attachement



Metal Primer Z étape par étape



Sablage

Application

Résine/Opaque

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Europe NV

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
<http://switzerland.gceurope.com>