



Renfert

making work easy

SILENT XS

NOUVEAU

Aspiration portable

NOUVEAU SILENT XS

Aspiration portable

SILENT XS est une aspiration portable conçue spécialement pour les cabinets dentaires et laboratoire de cabinet. Très puissante, elle aspire les poussières de meulage directement là où elles sont produites, par exemple lors de l'usinage de restaurations provisoires, de gouttières ou de prothèses. Cet appareil peu encombrant fonctionne sur batterie et peut donc être facilement déplacé d'un endroit à l'autre. Son fonctionnement silencieux en fait un allié idéal pour travailler de manière propre et efficace, et ce, quasiment partout.

Avantages

- Flexibilité - Fonctionnement sur batterie et sans fil garantissant une mobilité maximale, du fauteuil dentaire jusqu'au laboratoire de cabinet.
- Simplicité - Commande à une main et éclairage à LED assurant une visibilité optimale de l'objet traité. Idéal pour les brefs travaux de meulage.
- Propreté - Air ambiant propre et protection efficace contre la poussière grâce au filtre H13/HEPA offrant un degré de séparation de 99,99 %. Sans sac à poussière.

Détails

- Fonctionnement silencieux permettant de travailler dans un environnement de soins calme.
- Peu encombrant grâce à des dimensions réduites, s'intègre et se range facilement.
- Longues durées de service grâce au fonctionnement sur batterie et sur secteur.
- Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses pouvant être désinfectées conformément à un processus validé.
- Manipulation aisée grâce au design ergonomique et la commande à une main.

Données techniques

Tension de secteur admissible (adaptateur secteur)	100 – 240 V
Fréquence réseau admissible (adaptateur secteur)	50 – 60 Hz
Débit volumique (max.)	510 l/min
Technique de filtration	Filtre fin
Qualité du filtre	HEPA / H13
Pression acoustique (LpA à débit volumique max.)	52,7 dB (A)
Poids (sans batterie)	1,12 kg
Dimensions (l x h x p), vitre incluse	223 x 248 x 193 mm
Batterie (non fournie)	8 x AA (NiMH rechargeable)

Attention : Ne pas utiliser de Li-ion !



easy use




silent



perfect view



compact

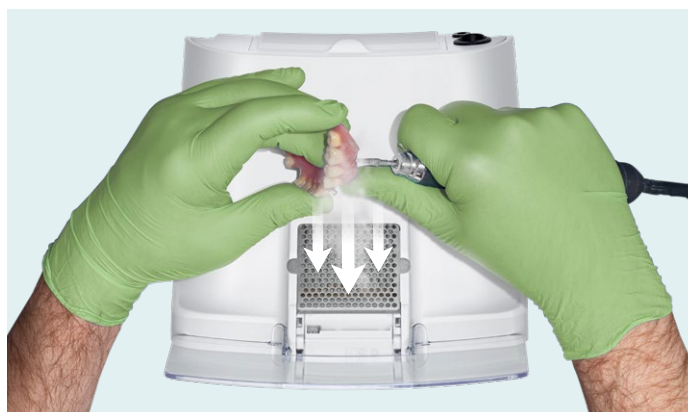

Aspiration efficace des poussières de meulage avec grille pratique de protection – pour travailler en toute propreté et sécurité

Référence

SILENT XS	Réf. 29220000
SILENT XS, US / JP	Réf. 29221000
SILENT XS, ROW	Réf. 29223000
Assiette de travail	Réf. 29220001
Set de filtres (3 pièces, incl. filtre évacuation d'air)	Réf. 29220002